


Конфигурации Easy Radial

Проводниковый катетер Launcher

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛУЧЕВОЙ ДОСТУП

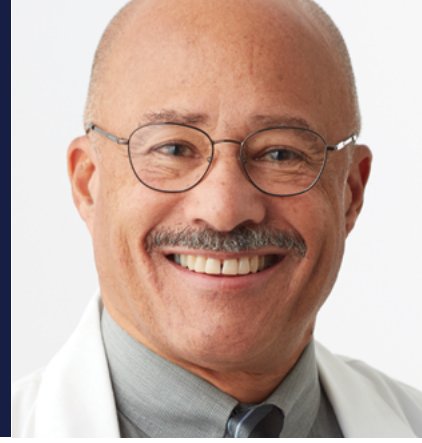


КОНФИГУРАЦИИ EASY RADIAL РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТРАНСРАДИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР

Конфигурации Easy Radial позволяют преодолеть трудности, возникающие при лучевом доступе. Каждый из пяти вариантов обеспечивает необходимую поддержку и легкий доступ в артерию, позволяя справляться с любыми анатомическими сложностями.

Launcher Easy Radial - оптимальный выбор для лучевого доступа.

Конфигурации Easy Radial предназначены для правого лучевого доступа и подходят для катетеризации как правой, так и левой коронарной артерии.

Конфигурации Easy Radial для левой коронарной артерии

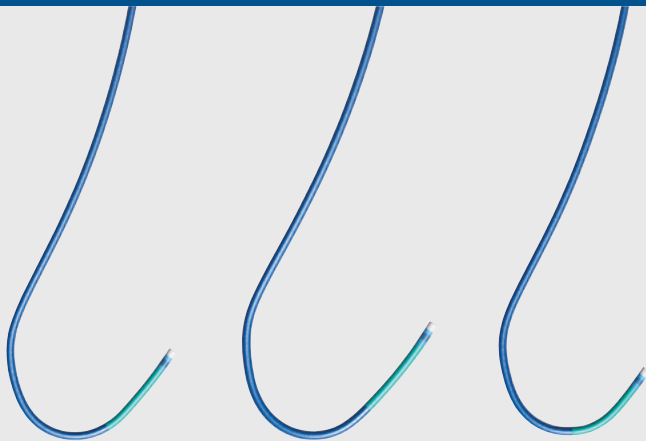


Easy Radial Left

Easy Radial Left
Long Tip

Easy Radial Left
Short Tip


Конфигурации Easy Radial для правой коронарной артерии

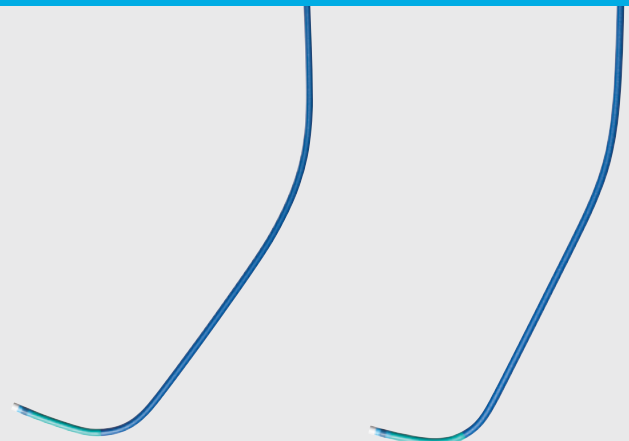

Easy Radial Right

Easy Radial Right
Short Tip

Конфигурации Easy Radial в корне аорты

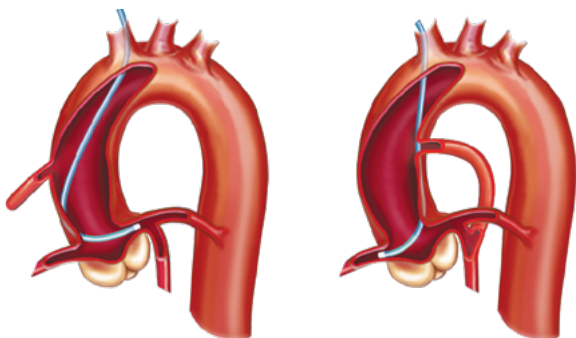

Easy Radial Left

Easy Radial Right


Рекомендации по размеру

Вид дуги	Артерия
ERADL	Ствол левой коронарной артерии, обычный размер аорты
ERADLLT	Ствол левой коронарной артерии, широкая восходящая аорта
ERADLST	Ствол левой коронарной артерии, узкая восходящая аорта
ERADR	Правая коронарная артерия, обычный диаметр восходящей аорты
ERADRST	Правая коронарная артерия, узкая восходящая аорта

Уникальная полнотенная технология Full-Wall

Все проводниковые катетеры Launcher производятся с использованием полнотенной технологии. Уникальная конструкция shaft катетера позволяет достичь компромисса между большим просветом и высокой прочностью катетера с отличной памятью формы

Между внутренним и наружным слоями инкапсулирована оплетка из плоской проволоки, благодаря чему стенки катетера тонкие, но при этом очень прочные.

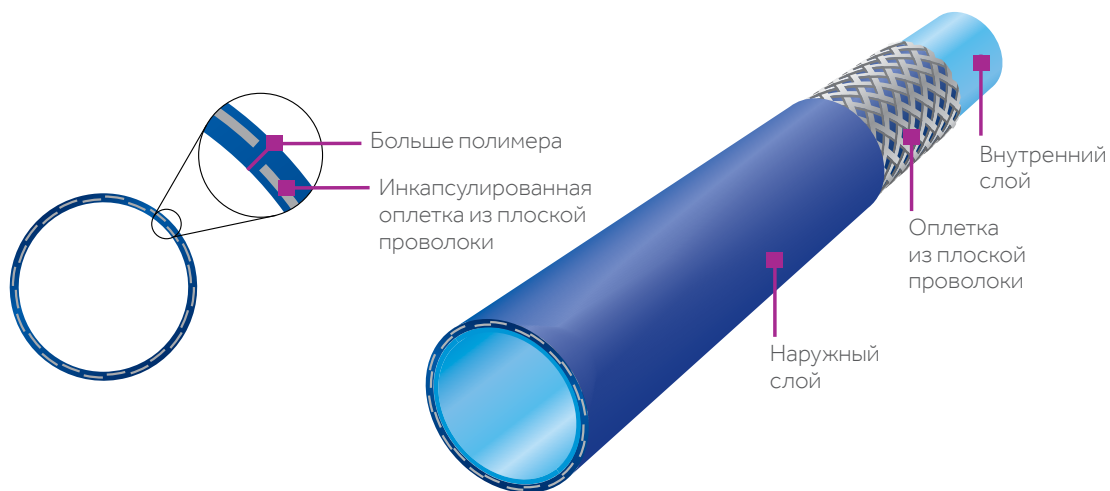

Проводниковые катетеры Launcher

- Большой просвет обеспечивает удобство работы
- Гибкий дистальный сегмент гарантирует коаксиальную позицию и безопасность глубокой интубации
- Усиленный shaft для бескомпромиссной поддержки
- Более 230 моделей для различных видов доступа

Информация для заказа

Конфигурация	Проводниковый катетер Launcher	
	5 F	6 F
Easy Radial left	LA5ERADL	LA6ERADL
Easy Radial left long tip	LA5ERADLLT	LA6ERADLLT
Easy Radial left short tip	LA5ERADLST	LA6ERADLST
Easy Radial right	LA5ERADR	LA6ERADR
Easy Radial right short tip	LA5ERADRST	LA6ERADRST

Medtronic

ООО «Медтроник»

Россия, 123112, Москва
Пресненская наб., д.10,
9 эт., пом. III, ком. 41, Башня С
Тел.: +7 495 580-7377
Факс: +7 495 580-7378

medtronic-cardiovascular.ru
medtronic.ru

Для медицинских специалистов.
Товар сертифицирован.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07047 от 26.05.2010
UC202000285 RU © 2016 Medtronic. Все права защищены