


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Код продукта	Название продукта
RDN016	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий Symplicity Spyral
RDN017	Генератор РЧ для абляции почечных артерий Symplicity G3
RDN012	Ножная педаль для генератора РЧ для абляции почечных артерий Symplicity G3
SB6RDND1K	Проводниковый катетер Sherpa, вариант исполнения: Sherpa NX Balanced 6F, RDN, 55 см
LA61MAK	Проводниковый катетер Launcher 6F, IMA, 55 см
SB61MAK	Проводниковый катетер Sherpa, вариант исполнения: Sherpa NX Balanced 6F, IMA, 55 см

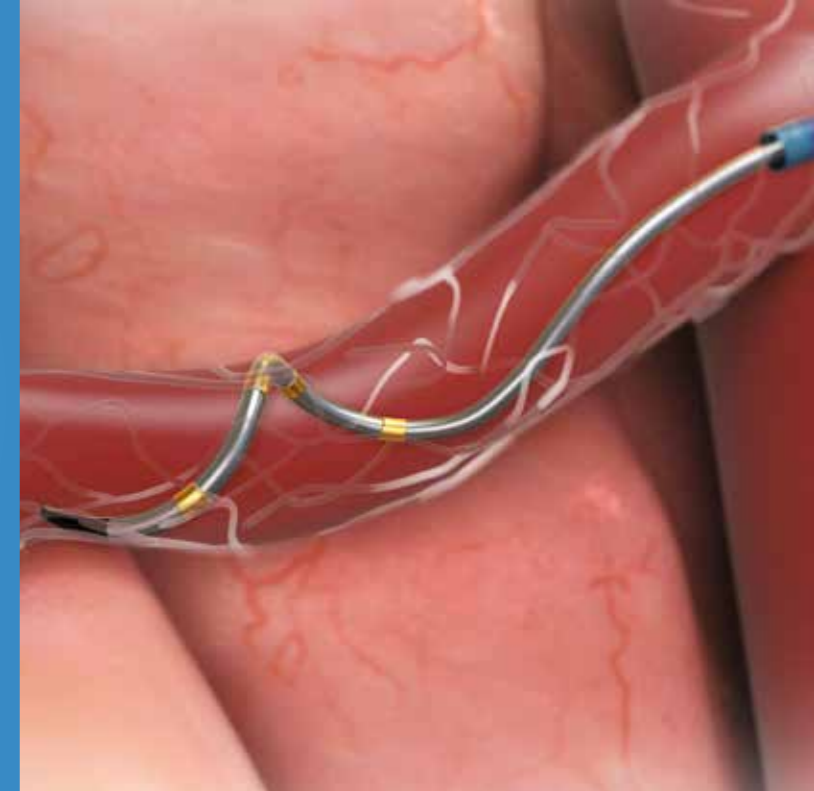

Symplicity Spyral

Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий

Medtronic

Информация предназначена для медицинских специалистов.
Товар сертифицирован.

Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий Symplicity Spyral.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5672 от 20.04.2017

Генератор РЧ для абляции почечных артерий Symplicity G3 с принадлежностями.
Регистрационное удостоверение №РЗН 2017/5763 от 22.05.2017

Устройство для ангиографии и ангиопластики с принадлежностями.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07047 от 26.05.2010

UC202001513 RU © Medtronic 2018. Все права защищены.

ООО "Медтроник"
123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru
www.medtronic.ru

Medtronic
Further, Together

SYMPPLICITY SPYRAL

Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий

Катетер Symplicity Spyral

Катетер Symplicity Spyral, разработанный на основе технологии Symplicity, предназначен для лечения пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией.



Равномерная абляция в четырех квадрантах

- Спиральная форма катетера с четырьмя электродами позволяет осуществлять одновременную подачу энергии к четырем квадрантам
- Короткий цикл абляции - 60 секунд

Подходит для разной анатомии


- Самораскрывающаяся спиральная конструкция подходит для различной анатомии почечных артерий
- Катетер имеет универсальный размер, предназначенный для сосудов диаметром 3-8 мм



Спиральная форма катетера

Высокая доставляемость¹

- Низкий профиль катетера обеспечивает прекрасную доставляемость
- Снабжен системой доставки быстрой смены, совместим с проводником 0.014" и проводниковым катетером 6F

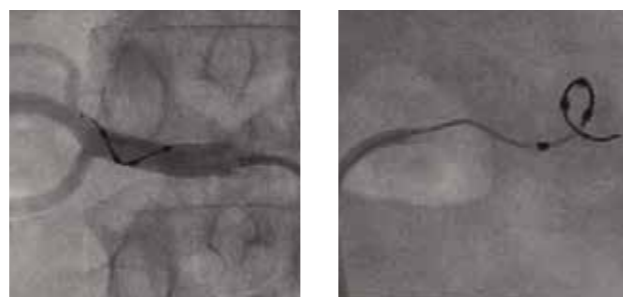

Ангиография почечных артерий

¹ Неопубликованные данные испытаний Medtronic

SYMPPLICITY G3

Генератор РЧ для абляции почечных артерий

Symplicity G3 Генератор РЧ для абляции почечных артерий

Генератор Symplicity G3 обеспечивает контролируемую подачу радиочастотной (РЧ) энергии к катетеру Symplicity Spyral во время процедуры ренальной денервации.

Надежные алгоритмы генератора для безопасности пациента

- Интерфейс с сенсорным экраном позволяет индивидуально выбрать электроды или отменить выбор на усмотрение врача
- Генератор обеспечивает постоянный мониторинг показателей температуры и импеданса в месте соприкосновения каждого электрода со стенкой сосуда
- В комплект входит пульт дистанционного управления и ножная педаль для быстрой активации/остановки подачи энергии



Пульт дистанционного управления для генератора Symplicity G3